

Instruktioner för dig som behandlas med

GONAL-*f*[®]

FÖRFYLLED INJEKTIONSPENNA




GONAL-*f*[®]

MERCK



VAD GONAL-F ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

GONAL-f® innehåller ett läkemedel som kallas follitropin alfa. Follitropin alfa är en typ av "follikelstimulerande hormon" (FSH), som tillhör hormonfamiljen "gonadotropiner". Gonadotropiner är involverade i fortplantning och fertilitet.




HOS VUXNA KVINNOR ANVÄNDS GONAL-F:

- För att hjälpa till att frigöra ett ägg från äggstocken (ägglossning) hos kvinnor som inte har ägglossning och som inte svarat på behandling med ett läkemedel som kallas "klomifencitrat".
- Tillsammans med ett annat läkemedel som kallas "lutropin alfa" ("luteiniserande hormon" eller LH) för att hjälpa till att frigöra ett ägg från äggstocken (ägglossning) hos kvinnor som inte har ägglossning på grund av att deras kropp producerar mycket liten mängd gonadotropiner (FSH och LH).
- För att hjälpa till att utveckla flera folliklar (varje innehåller ett ägg) hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning (åtgärder som kan hjälpa dig att bli gravid) såsom "in vitro-fertilisering", "gametöverföring till äggledare" eller "zygotöverföring till äggledare".

HOS VUXNA MÄN ANVÄNDS GONAL-F:

- Tillsammans med ett annat läkemedel som kallas "humant koriongonadotropin" (hCG) för att främja produktion av sperma hos män som är ofruktsamma på grund av låg nivå av vissa hormoner.

INJEKTIONSPENNAN

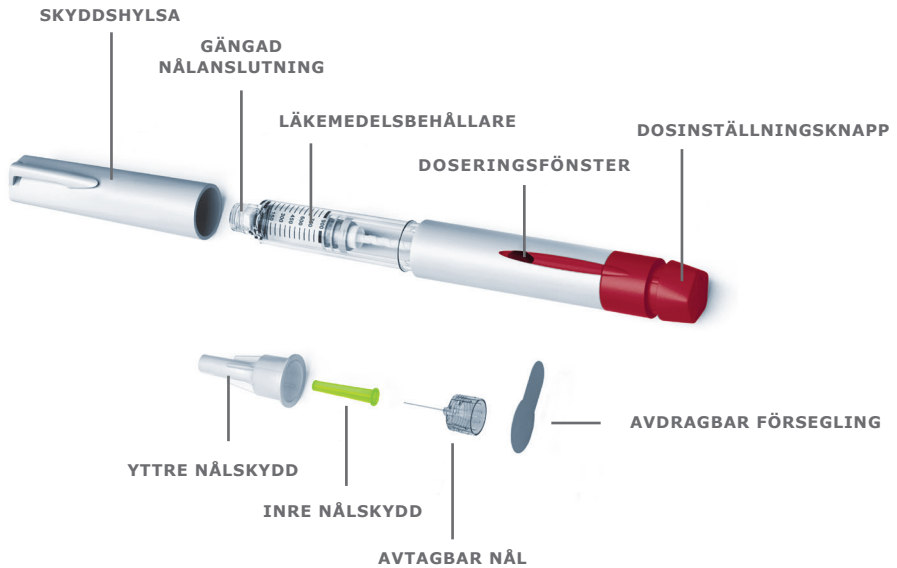

FÖRVARING

Förvara alltid GONAL-f® förfylld injektionspenna med skyddshylsan på.

Obruten förpackning förvaras i kylskåp (2° C-8° C).
Får ej frysas. Ljuskänsligt.

Innan förpackningen öppnas och inom hållbarhetstiden, kan läkemedlet tas ut från kylskåpet vid temperatur upp till högst 25° C i en sammanhållen period på upp till tre månader, och måste sedan kastas.

Efter öppnandet ska GONAL-f® förvaras mellan 2° C och 25° C i maximalt 28 dagar. Anteckna gärna första användningsdatum på den förfyllda injektionspennan.

1

FÖRBERED INJEKTIONSPENNAN FÖR INJEKTION




Tag bort den avdragbara förseglingen från det yttre nålskyddet.

Före injektionen, låt den förfyllda injektionspennan ligga i rumstemperatur i minst 30 minuter före injektionen.



Skruva fast injektionspennans gängade spets på det yttre nålskyddet tills du känner ett lätt motstånd.

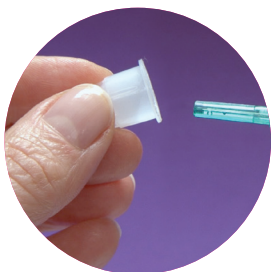

Tag sedan bort det yttre nålskyddet.

2

STÄLL IN DOSEN

- Första gången du använder en ny GONAL-f förfylld injektionspenna, titta efter en liten droppe/små droppar vätska innan du ställer in dosen.
- Ställ in den dos du behöver genom att vrida dosinställningsknappen tills du kan läsa den dos som din läkare har ordinerat i doseringsfönstret.
- Kontrollera dosen du har ställt in innan du går vidare till nästa steg. Doseringsfönstret ska nu visa den dos som din läkare har ordinerat dig. (Se exempel 75 IE).



Om du ställt in
en för hög dos,
vrider du bara tillbaka
dosinställningsknappen
till rätt dos.

3

INJICERA DOSEN


- Välj injektionsställe enligt instruktion från din läkare eller sjuksköterska. Rengör huden.
- Tag försiktigt av det inre nålskyddet.
- Stick in nålen långsamt i huden och tryck sedan in dosinställningsknappen så långt det går. Låt nålen vara kvar i huden med dosinställningsknappen intryckt i minst 5 sekunder.
- Behåll dosinställningsknappen intryckt när du drar ut nålen ur huden.
- Siffran som visas i doseringsfönstret återgår till 0. Detta indikerar att hela dosen har givits.

Om det inte finns tillräcklig dos i pennan så visas den resterande mängd som behövs för full dos i doseringsfönstret. Detta är den dos du måste injicera med en ny förfylld injektionspenna.





EFTER ATT DU INJICERAT
TA AV NÅLEN EFTER
VARJE INJEKTION!

- Sätt tillbaka det yttre nålskyddet på nålen.
 - Skruva av nålen genom att vrida nålskyddet motsols.
 - Sätt nu tillbaka skyddshylsan på injektionspennan.
- 

GONAL-f® förfylld injektionspenna finns i 900 IE, 450 IE och 300 IE



GONAL-f® 900 IE/1,44 ml
inklusive 20 nålar för subkutan bruk
varunummer: 016892 Gonal-f 900 IE



GONAL-f® 450 IE/0,72 ml
inklusive 12 nålar för subkutan bruk
varunummer: 016938 Gonal-f 450 IE



GONAL-f® 300 IE/0,48 ml
inklusive 8 nålar för subkutan bruk
varunummer: 016927 Gonal-f 300 IE

Läs noga igenom informationen i bipacksedeln före användning.

GONAL-f® (follitropin alfa), Rx. Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna.

Styrkor och förpackningar: Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 IE/0,48 ml (motsvarande 22 mikrogram), 450 IE/0,72 ml (motsvarande 33 mikrogram) och 900 IE/1,44 ml (motsvarande 66 mikrogram).

Användning: Hos vuxna kvinnor används GONAL-f:

- för att hjälpa till att frigöra ett ägg från äggstocken (ägglossning) hos kvinnor som inte har ägglossning och som inte svarat på behandling med ett läkemedel som kallas "klomifencitrat"
- tillsammans med ett annat läkemedel som kallas "lutropin alfa" ("luteiniserande hormon" eller LH) för att hjälpa till att frigöra ett ägg från äggstocken (ägglossning) hos kvinnor vars kropp producerar mycket liten mängd gonadotropiner (FSH och LH).
- för att hjälpa till att utveckla flera folliklar (varje innehåller ett ägg) hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning (åtgärder som kan hjälpa dig att bli gravid) såsom "in vitro-fertilisering", "gametöverföring till äggledare" eller "zygotöverföring till äggledare".

Hos vuxna män används GONAL-f tillsammans med ett annat läkemedel som kallas "humant koriongonadotropin" (hCG) för att främja produktion av sperma hos män som är ofruktsamma på grund av låg nivå av vissa hormoner.

Varningar och försiktighet: Detta läkemedel ökar risken för utveckling av OHSS (Ovariellt hyperstimuleringsyndrom). Detta är när dina folliklar utvecklas för mycket och blir stora cystor. Om du får smärtor i nedre delen av buken, snabbt ökar i vikt, mår illa eller kräks eller om du får svårt att andas, ska du genast tala med din läkare.

Meddela din läkare om du tidigare eller nyligen har haft blodproppar i benen eller i lungorna, eller en hjärtinfarkt eller en stroke, eller om någon i familjen har haft det, eftersom det kan öka risken för att dessa problem uppstår eller förvärras vid behandling med GONAL-f.

För mer information, vänligen se www.fass.se.


Merck AB, Box 3033, 169 03 Solna. Tel: 08-562 445 00





medicin
instruktioner.se

Scanna koden för att
titta på instruktionsfilmen
för GONAL-f®

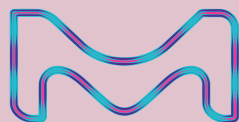

Merck AB
Box 3033, 169 03 Solna
Tel 08-562 445 00
www.merck.se



SE-GON-00061 April 2024

GONAL-f®

MERCK